

Bruksanvisning

# FJÄRRKONTROLL RC-N

**bernafon** 

*Your hearing • Our passion*



Grattis till din nya RC-N-fjärrkontroll. Med den kan du justera dina hörapparaters volym och programinställningar.



Vänligen läs hela innehållet innan du använder din fjärrkontroll. Här hittar du viktig information om handhavande och hantering samt säkerhetsinformation.

# Innehåll


Generella varningar	6
Vad finns i förpackningen	14
Produktöversikt	15
Sätta i och byta batteri	16
Använda tillsammans med dina hörapparater	20
Statuslampa	21
Justera volymen	22
Aktivera tyst läge/Mute	23
Byta program	25
Låsa/Låsa upp fjärrkontrollens knappar	26

Hål för rem	29
Skötsel	30
Användarinformation om fjärrkontrollens radiokommunikation	31
Internationell garanti	36


## Generella varningar

Läs igenom varningarna nedan innan du börjar använda fjärrkontrollen.

### **Säkerhetsföreskrifter**

 Fjärrkontrollen är ingen leksak och ska förvaras utom räckhåll för spädbarn, små barn och alla som riskerar svälja delar eller på annat sätt förorsaka sig själva skada. Uppsök genast läkare om du svält någon del.

- ⚠ Fjärrkontrollen får aldrig utsättas för hög värme. Lämna den t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i solen. Du kan heller inte torka den med en hårtork eller i en ugn och liknande värmkällor. Detta kan orsaka explosion och allvarliga skador.
- ⚠ Fjärrkontrollen får bara användas ombord på flygplan om flygpersonalen uttryckligen godkänt detta.

 Iakta försiktighet och att följ riktlinjerna från tillverkare av implanterbara defibrillatorer och pacemakers när det gäller användning av mobiltelefoner. Om du har ett aktivt implantat, förvara fjärrkontrollen på minst 15 cm avstånd från implantatet.

 Strömkällan i fjärrkontrollen alstrar inte tillräckligt med energi för att orsaka brand vid normal användning. Fjärrkontrollen har inte testats enligt överensstämmelse med internationella standarder som gäller för explosiva miljöer. Vi rekommenderar att du inte använder fjärrkontrollen i miljöer där explosionsrisk föreligger.



- ⚠ Regelbunden rengöring men en fuktig trasa utan rengöringsmedel rekommenderas. Fjärrkontrollen får inte utsättas för eller rengöras med rengöringskemikalier eller alkohol. Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och myggmedel kan skada fjärrkontrollen. Du ska alltid ta bort fjärrkontrollen innan du använder dessa produkter och se till att de hunnit torka innan du använder fjärrkontrollen.
- ⚠ Om du använder en handrem, kontrollera att den lämpar sig för ändamålet. Använd inte en halsrem p.g.a. strypningsrisken.

- ⚠ Använd inte fjärrkontrollen vid röntgen, CT/MR/PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi.
- ⚠ Om du använder fjärrkontrollen under körning kan du bli distraherad. Om trafiksituation eller lagar kräver det, sväng av och parkera bilen innan du använder fjärrkontrollen.
- ⚠ Använd alltid batterier som rekommenderas av din audionom. Batterier av dålig kvalitet kan läcka och orsaka kroppsskada. Ett uttjänt batteri ska tas ut så snart som möjligt.

- ⚠️ Försök aldrig ladda engångsbatterier. De kan explodera och orsaka allvarlig skada. Kassera aldrig batterier genom att bränna dem. Det finns en risk för att de kan explodera och orsaka allvarlig skada.
- ⚠️ Tänk på miljön, kassera inte din fjärrkontroll eller batterier i hushållssoporna. Återvinn fjärrkontrollen och batterier enligt lokala föreskrifter eller lämna in dem hos din audionom. Kontakta din audionom för mer information.

⚠ Fjärrkontrollen använder induktiva signaler för att överföra kommandon till hörapparaterna. Det har förekommit oro för att denna signal skulle kunna störa medicinska enheter som exempelvis pacemakers, även om det är mycket osannolikt. Som en extra försiktighetsåtgärd rekommenderar vi pacemakeranvändare att inte bära och använda fjärrkontrollen i en bröstficka eller runt halsen.

⚠ Störningsvärdena från fjärrkontrollen ligger långt under internationella gränsvärden för mänsklig exponering. Som en jämförelse är strålningen från fjärrkontrollen lägre än den oönskade strålning som avges från exempelvis halogenlampor, datorskärmar, diskmaskiner osv. Fjärrkontrollen är utformad för att uppfylla de internationella standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet.

# Vad finns i förpackningen

Det här finns i förpackningen tillsammans med fjärrkontrollen.



RC-N-fjärrkontroll  
Model: RC-2B




AAAA-batterier



Bruksanvisning

# Produktöversikt

- 1 Höja volymen
- 2 Sänka volymen
- 3 Knapp för programbyte
- 4 Statuslampa
- 5 Batterilucka
- 6 Handgrepp på batterilucka
- 7 Hål för rem

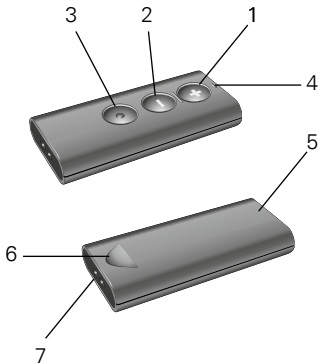





## Sätta i och byta batterier

Fjärrkontrollen drivs av 2 alkaliska AAAA-batterier. Följ instruktionerna nedan för att sätta i och ta ur batterierna.

### **Ta loss batteriluckan**



1. Använd tummen och tryck neråt på batteriluckans handgrepp.
2. Från den motsatta änden av batteriluckan, dra luckan i samma riktning som fingergreppet
3. Lyft batteriluckan
4. Sätt i batterierna i batterifacket



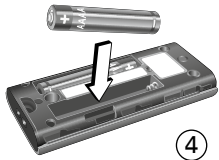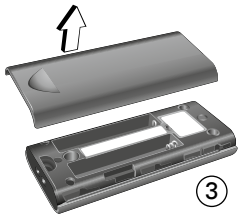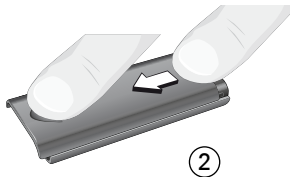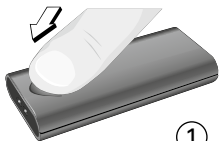

## Sätta tillbaka batteriluckan

1. Sätt tillbaka batteriluckan ca 6 mm från fjärrkontrollens översida.
2. Tryck försiktigt tills det klickar.

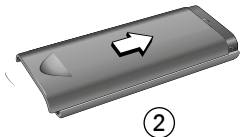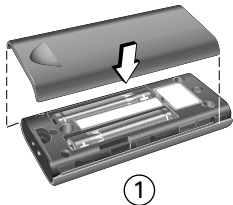

**i** Använd aldrig våld mot batteriluckan. Om det är svårt att stänga, kontrollera att den är rätt inpassad och justera den sedan så att den smidigt klickar på plats. Batteritiden varierar beroende på användning.


## Användning tillsammans med dina hörapparater

Du kan använda fjärrkontrollen tillsammans med dina hörapparater på ett avstånd upp till 1 meter.

### Rekommenderad användning




I handen

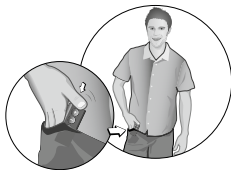


I fickan

# Statuslampa

Fjärrkontroll	Statuslampan blinkar orange efter varje tryck på knapparna.	
Svagt batteri	Statuslampan blinkar sakta (2 ggr varannan sekund) och indikerar då att det är dags att byta batteri.	
Fjärrkontrollens knappar är låsta	Statuslampan blinkar 3 ggr när knapparna är låsta.	


## Justera volymen

Med fjärrkontrollen kan du justera volymen på hörapparaterna med hjälp av volymknapparna.

Höja volymen	Tryck på plus-knappen för att höja volymen i dina hörapparater.	
Sänka volymen	Tryck på minus-knappen för att sänka volymen i dina hörapparater.	

## Aktivera tyst läge/Mute

Med fjärrkontrollen kan du aktivera tyst läge/Mute genom att använda knappen för att sänka volymen.


Aktivera tyst läge/Mute	Tryck och håll in knappen för att sänka volymen i 2–3 sekunder. Statuslampan stängs av när tyst läge/Mute är aktiverat.	
Avaktivera tyst läge/Mute	För att avaktivera tyst läge/Mute, tryck på någon av knapparna	

**i** Tyst läge/Mute ska inte användas för att stänga av hörapparaterna. Se användarmanualen för instruktioner hur du stänger av dem.



## Byta program

Med fjärrkontrollens programknapp kan du växla mellan hörapparaternas program.

<p>Byta/växla mellan program</p>	<p>Du växlar mellan hörapparaternas program genom att trycka på knappen under minusknappen (rund prick) Vid varje tryckning aktiveras nästa program i cykeln.</p>	 An illustration of a hand with the index finger pressing a button on a grey remote control. The remote control has three buttons: a plus sign (+) at the top, a minus sign (-) in the middle, and a circular button with a small dot in the center at the bottom. The finger is pressing the bottom button. Motion lines around the finger indicate the action of pressing.
----------------------------------	---	---

## Låsa/Låsa upp fjärrkontrollens knappar

För att undvika att komma åt knapparna av misstag, lås knapparna när du har den i fickan.

### **Låsa fjärrkontrollens knappar**

1. Tryck och håll nere minusknappen och programknappen i 3–4 sekunder.



2. Statuslampan blinkar två gånger när knapparna är låsta.

Kontrollera att knapparna är låsta genom att trycka på någon av knapparna. Statuslampan blinkar då 3 gånger. (se sidan 21).

## **Låsa upp fjärrkontrollens knappar**

1. Tryck och håll nere minusknappen och programknappen i 3–4 sekunder.
2. Statuslampan lyser med ett fast sken tills knapparna är upplåsta.

## Hål för rem

Fjärrkontrollen har ett remuttag. Vilken lämplig rem som helst kan användas.

1. Ta bort batteriluckan (se sidorna 16 och 17).
2. Dra en lämplig rem genom hålet.



# Skötsel

- Vid byte av batteri eller rengöring, håll den över ett mjukt underlag för att undvika skada om du skulle råka tappa den.
- Rengör fjärrkontrollen regelbundet med en torr trasa eller pappersduk.
- Låt inte fjärrkontrollen bli blöt.

# Användarinformation om fjärrkontrollens radiokommunikation

## **USA and Canada**

Due to the limited size available on the device, many of the relevant approval markings are found in this document.

## **This instrument is certified under:**

FCC ID: 2ACAHREMCTR01

IC: 11936A-REMCTR01

The device complies with Part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference; and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.



These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

**Caution:**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Härmed deklarerar SBO Hearing A/S att denna fjärrkontroll överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiven 1999/5/EC.

Överensstämmelser finns tillgängliga hos:

SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark  
[www.sbohearing.com](http://www.sbohearing.com)

## Internationell garanti

Fjärrkontrollen omfattas av en begränsad garanti som täcker fel och brister i material och utförande.

Garantin är ogiltig om en defekt är en defekt är en följd av missbruk eller ovarsam hantering eller om fjärrkontrollen har reparerats av ej auktoriserad servicepersonal.

Läs igenom garantin och be din audionom att fylla i garantikortet korrekt.

Datum: \_\_\_\_\_ Modell: \_\_\_\_\_

Garantiperiod: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Hörsekllinik

# Anteckningar

---

---

---

---

---

---

---

---





SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark  
[www.sbohearing.com](http://www.sbohearing.com)



Avfall från all elektronisk  
utrustning ska hanteras  
enligt lokala föreskrifter.



0000143921000001

**bernafon**   
*Your hearing • Our passion*